

# InFace IPL Professional Depilatory Laser

## Instrukcja Obsługi

InFace IPL Depilator laserowy jest niezależnie opracowywany i produkowany przez firmę Shenzhen InFace echnology Co., Ltd, która jest stowarzyszona z Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd. od momentu powstania. Firma zawsze opierała się na praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwie produktów, aby tworzyć naukowe i inteligentne produkty, które staramy się odkrywać i wprowadzać innowacje.

### SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU

Depilacja jest nieinwazyjna, bezpieczna i wygodna

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
- Do tego produktu należy używać zasilacza z zestawu i prawidłowo podłączyć końcówkę zasilacza do gniazdka domowego, aby uniknąć uszkodzenia.
- Proszę nie używać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, nie używaj go, aby uniknąć wypadków.
- Proszę nie stosować na skórę po oparzeniach słonecznych lub po operacji plastycznej skóry lub w miejscu, gdzie mamy rany.
- Proszę nie używać tego produktu, jeśli widoczne są ciemne plamy, takie jak piegi, znamiona, pieprzyki, tatuaże i obszary makijażu permanentnego.
- Proszę nie stosować tego produktu podczas ciąży i laktacji

- Proszę nie używać tego produktu, gdy używane są aktywne implanty, takie jak stymulator regulujący rytm serca czy pompa insulinowa.
- Proszę nie używać tego produktu u osób, które otrzymały radioterapię lub chemioterapię w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Proszę nie używać tego produktu u osób z cukrzycą, chorobą serca, lekką alergią, padaczką, chorobami immunosupresyjnymi (w tym zakażeniem HIV lub AIDS).
- Depilator nie jest zalecany dla osób z alergią, chorobami skóry, zapaleniem skóry, alergią skórą, wypryskiem skórny, obrzękiem itp.
- Ten produkt nie działa z ciemną skórą.
- Jeśli w przeszłości występowała nadwrażliwość na światło przyjmowanie leków zwiększających wrażliwość skóry, w tym niewęgetatywne leki przeciwzapalne, (np. Aspiryna, ibuprofen, acetaminofen, tetracyklina, fen Tiofen, tioen, diuretyki sulfonilomoczniki, leki sulfonamidowe, trimetoprim, fluorouracyl, winblastyna, grzezofulwina, AHA, kwas retinowy, Accutane lub miejscowy retinoid) Nie używaj ich.
- Nie stosować, jeśli obecnie zazwyczaj AHA, kwas beta, kwas retinowy, przyszcze (kwas izoretinowy), retinoidy opyczne lub kwas azelainowy.
- Nie należy stosować leków przeciwwądrościowych (izoretinoiny) przy
- Jeśli kiedykolwiek miałeś opryszcze, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.
- Nie używaj tego produktu w miejscu brodawek, tatuaży i miejsc po makijażu permanentnym

Proszę wysuszyć ręce przed użyciem, aby zapobiec wnikięciu wody lub innej cieczy do urządzenia, a tym samym uszkodzeniu urządzenia.


- Proszę zapoznać się z tabelą natężenia światła, aby określić odpowiednią intensywność światła; Jeśli zauważysz ubytek lub nieprawidłowości na skórze, natychmiast przestań go używać.
- Odfąć zasilanie w celu czyszczenia i konserwacji.
- Ten produkt nie nadaje się dla dzieci, przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj tego produktu (alkoholu, benzyny, zmywacza do paznokci, sprayu itp.) w pobliżu łatwopalnych przedmiotów
- Nie używaj tego produktu w środowisku z wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa (w pobliżu wanny, umywalki prysznicowej itp.).
- Podczas używania nie należy spożywać pokarmów wrażliwych na światło (takich jak szpinak, rzepak, musztarda itp.).
- Podczas pracy surowo zabrania się zasłaniania wlotu powietrza i otworów wentylacyjnych, aby nie wpływać na rozpraszanie czystego powietrza.
- Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu. W sprawach związanych z konserwacją skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Po użyciu tego produktu należy chronić skórę przed słońcem

### Specyfikacja

Nazwa produktu: InFace IPL depilacja  
 Model Produktu: ZH-01D  
 Napięcie znamionowe: 12V  
 Moc znamionowa: 36W  
 Wilgotność podczas pracy: 30%-85%  
 Rozmiar opakowania: 240x148x71mm  
 Rozmiar produktu: 148x75x41mm  
 Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C  
 Temperatura pracy: 5°C - 35°C

### Zestaw zawiera:

Ladowarka

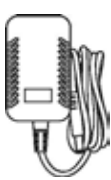


Brzytwa



Okulary ochronne



Depilator

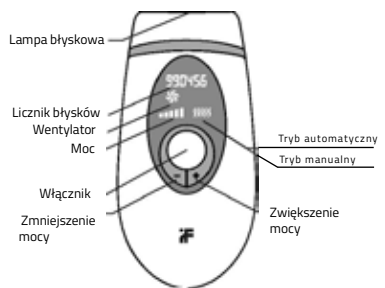

Rysunki związane z nimi funkcje produktu opisane w tej instrukcji, a także niektóre definicje terminów, mogą być używane tylko jako odniesienie. Użytkownicy powinni mieć pierwszeństwo w naturze. Mając na uwadze konsekwentną politykę ciągłego doskonalenia produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

### UWAGI

Przed pierwszym użyciem tego produktu należy przeprowadzić test nasświetlenia skóry dla każdej części i odczekać 24 godziny przed depilacją światłem.

Uwaga: Jeśli zauważysz jakikolwiek zmianę koloru skóry od ostatniego użycia, na przykład podczas opalania, wykonaj ponownie test skóry.

Abym uzyskać jak najlepsze efekty, podczas testu skórnego należy starać się wybrać jak największą intensywność, która nie będzie powodować dyskomfortu skóry.

Nie patrz bezpośrednio w port światła ani nie mrugaj okiem podczas pracy. Proszę nosić okulary ochronne. Jeśli soczewka filtra w porcie światła jest poplamiona, nie rozpylaj alkoholu bezpośrednio na port światła.

### Przygotowanie

W przypadku części, które wymagają depilacji, usuń włosy brzytwą (poniżej 1 mm) Uwaga: Nie używaj kremu do depilacji/golenia



Oczyść skórę, aby upewnić się, że powierzchnia skóry jest wolna od włosów, całkowicie sucha i wolna od substancji olejnych (na przykład nie pozostawiaj resztek, takich jak płyn zapachowy, balsam, perfumy, opalanie rzyza i krem przeciwśłoneczny)

Sprawdź, czy urządzenie i port światła są czyste i uporzędkowane oraz czy nie zostały na nich włosy, kurz, włókna i inne zanieczyszczenia. Jeśli tak, wytrzyj je ostrożnie. Zapoznaj się z zalecaną poniżej tabelą natężenia światła, dostosuj intensywność światła zgodnie z kolorem skóry i włosów na ciele i utrzymuj się w wygodnym stanie.

Kolor skóry \ Kolor włosów	Biały / szary	Czerwony	Beż	Jasny blond	Brązowy	Ciemny brąz	Czarny
Biały	0	0	0	4/5	4/5	4/5	4/5
Beżowy	0	0	0	4/5	4/5	4/5	4/5
Jasny brąz	0	0	0	4/5	4/5	4/5	4/5
Brąz	0	0	0	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3
Ciemny brąz	0	0	0	0	0	0	0
Czarny	0	0	0	0	0	0	0

Jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, zmniejsz intensywność światła. Zalecane natężenie światła (1-5) W poniższej tabeli „X” oznacza, że ten produkt nie nadaje się do użytku 5 jest zalecany do oświetlenia części depilowanych: nóg, pach, ramion, czoła itp.



Użytkownicy pki męskiej: nie używaj produktu na twarzy z brodą lub męskimi narządami płciowymi. Nie stosować wokół oczu, w pobliżu brwi, noszdry, wewnętrznych uszu lub odbytu. Kobiety: sutki, otoczek, wargi sromowe mniejsze, pochwa, nie używać.

Opakowanie zutilizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

