


inFace Blackhead Remover

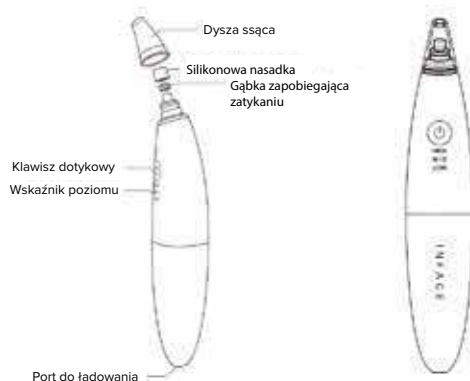

MS7000 Cechy

1. Dysza ssąca do pryszczów Inface
2. Specjalny relaksujący tryb ssania
3. Nie tylko wysysa zaskórniki, ale także uczą jak zaciskać pory skóry

Specyfikacja produktu

Model	MS7000
Rozmiar	183mm*35mm
Waga netto	About 135g
Pojemność baterii	400mAh
Napięcie ładowania	5V
Prąd ładowania	300mA
Długość ładowania	About 2h
Prąd czuwania	40 uA
Temperatura pracy	0°C~40°C
Materiał	Transparent PC, Matted UV, Plating
Moc ssania	Max 63kpa

inFace Blackhead Remover



Działanie

1. Przyrząd ma do wyboru dwa tryby. Tryb 1 (świeci się niebieskie światło) to tryb ciągłego zasysania; tryb 2 (świeci się pomarańczowe światło) to tryb zwalniania ssania.
2. W stanie wyłączenia, kliknij dwukrotnie klawisz dotykowy, aby włączyć przyrząd.
3. W stanie włączonym, naciśnij i przytrzymaj klawisz dotykowy, aby przełączyć tryb na tryb 2 zwalniania przez odsysanie.
4. W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk dotykowy, aby przełączyć siłę ssania (NISKA / ŚREDNIA / WYSOKA).
5. W stanie włączenia, kliknij dwukrotnie klawisz dotykowy, aby wyłączyć przyrząd.

Sposób użycia

Wskazówki Przed użyciem

- Tryb 1, niebieskie światło włączone (tryb ciągłego ssania): Ten tryb ma dużą siłę ssania, odpowiedni dla typów skóry z grubszymi skórkami i dużymi porami, które mogą silnie wchłaniać głębokie zaskórniki skóry.
- Tryb 2, pomarańczowe światło włączone (tryb zwalniania zasysania):
W tym trybie urządzenie zasysa i wypuszcza, co jest wygodne i mniej bolesne, odpowiednie dla typów skóry o cienkich łuskach i wrażliwej skórze.
- Wybierz odpowiedni tryb pielęgnacji skóry.

Po pierwsze, rozpuść

1. Po umyciu twarzy rozgrzanym ręcznikiem przez 3-5 minut rozluźnij pory.
2. Dla uzyskania lepszego efektu zaleca się zwilżenie wacika tonikiem na zaskórniki, następnie nałożyć wacik na nos i zdjąć po 8-10 minutach.



Po drugie, ssij

1. W razie potrzeby wybierz tryb ciągłego ssania lub tryb zwalniania ssania, sprawdź siłę ssania na dłoni, a następnie wybierz odpowiedni poziom.
2. Zassaj skórę przyrządem, a następnie przesunij ją prawidłowo, nie pozostawiaj w tym samym miejscu dłużej niż 2 sekundy.
3. Po oczyszczeniu zaskórników wyczyść dyszę ssącą wilgotnymi chusteczkami lub wodą.



Po trzecie, kurcz się

1. W celu uzyskania lepszych rezultatów zaleca się zwilżenie wacika esencją minimalizującą pory, następnie nałożyć wacik na nos i zdjąć po 8019 minutach.
2. Jeśli jest nadmiar serum, wklepuj w twarz, aż się wchłonie.



Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem i dokładne jej przechowywanie. Produkt jest przedmiotem osobistym i wielu użytkowników nie jest zachęcanych.

- Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze. Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, przestań go używać, aby uniknąć wypadków.
- Ten produkt nie powinien być stosowany do gałek ocznych, powiek, małżowin usznych, szyi, żył, w przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie skóry.
- Nie stosować preparatu na skórę poddaną zabiegom kosmetycznym, w tym chirurgii plastycznej i korekcji nosa; nie stosować preparatu na zranioną i bliznowatą skórę.
- Wysuszyć wodę lub inny płyn na rękach przed użyciem, aby zapobiec przedostaniu się wody lub innych płynów do przyrządu i uszkodzeniu przyrządu.
- Jeśli skóra i ciało odczuwają ból lub nietypowe objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Czyść i utrzymuj produkt w stanie wyłączonym.
- Dzieci nie mogą używać produktu, przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych (alkohol, benzyna, zmywacz do paznokci, spray itp.).
- Produkt nie jest wodoodporny, prosimy nie trzymać go w łazience ani innych mokrych miejscach. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie płucz bezpośrednio pod kranem.
- Nie zaleca się stosowania preparatu alergikom, osobom z chorobami skóry, zapaleniami skóry, alergiami skórными i ciężkimi oparzeniami słonecznymi, osobom z uszkodzeniami skóry, egzemą, obrzękiem itp.