


inFace IPL Hair Removal

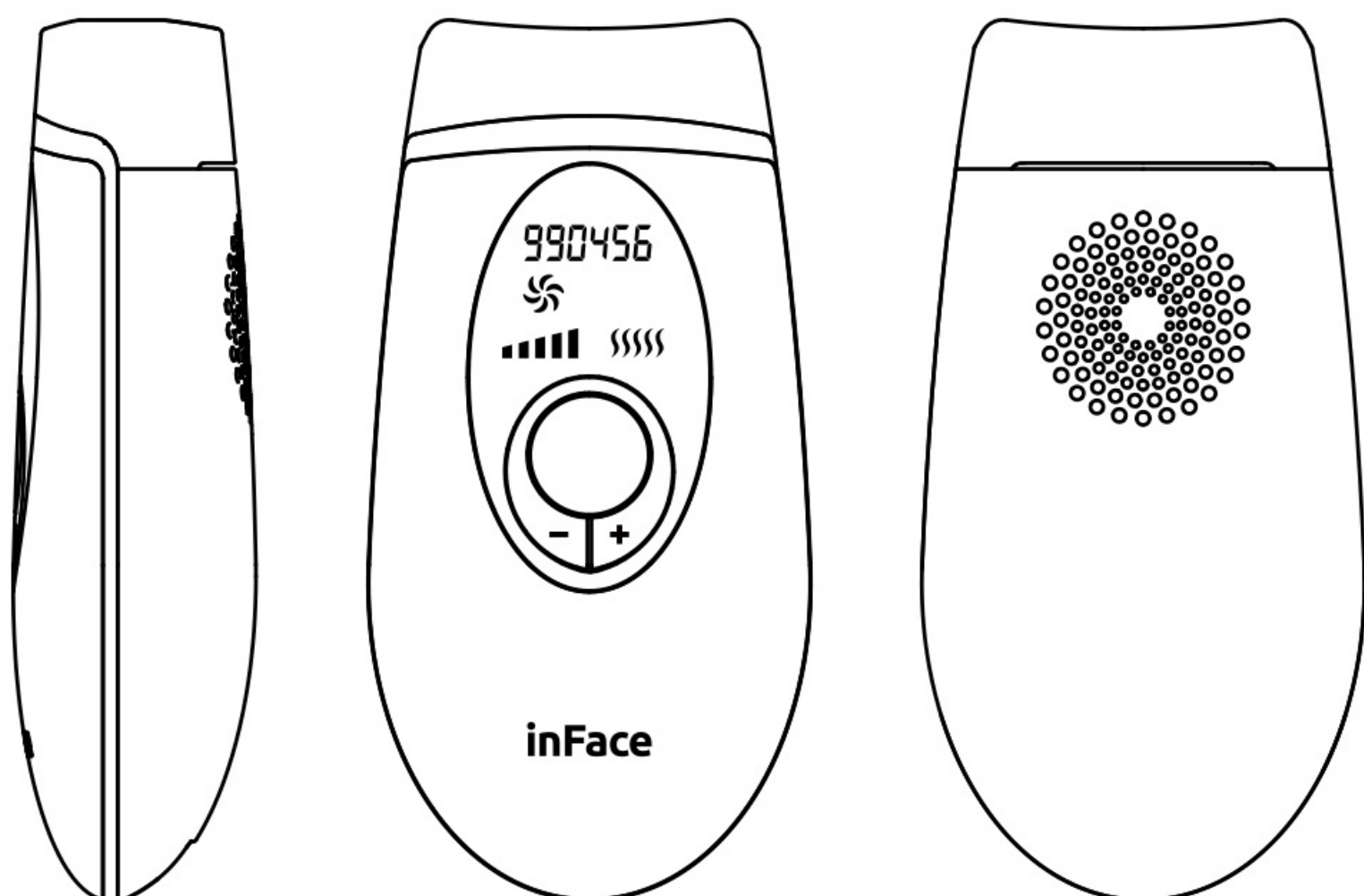

ZH-01D Cechy

- 1. 1 milion efektywnych błysków
- 2. Mały łatwy do przenoszenia, duży obszar wyjściowy światła
- 3. Efektywne skupienie, światło samoindukcyjne

Specyfikacja produktu


Model:	ZH-01D
Nazwa:	inFace IPL hair removal
Napięcie znamionowa:	12V ===
Temperatura przechowywania:	0°C~40°C
Temperatura robocza:	5°C~35°C
Wilgotność podczas pracy:	3 0%-85%
Rozmiar produktu:	148*75*41mm
Wielkość paczki:	240*148*71mm

inFace IPL Hair Removal




Przygotowanie


W przypadku części, które wymagają depilacji, usuń włosy brzytwą (poniżej 1 mm) Uwaga: Nie używaj kremu do depilacji/golenia Oczyszć skórę, aby upewnić się, że powierzchnia skóry jest wolna od włosów, całkowicie sucha i wolna od substancji olejnych (na przykład nie pozostawiaj resztek, takich jak płyn zapachowy, balsam, perfumy, opalanie: ryza i krem przeciwsłoneczny) Sprawdź, czy urządzenie i port światła są czyste i uporządkowane oraz czy nie zostały na nich włosy, kurz, włókna i inne zanieczyszczenia. Jeśli tak, wytrzyj je ostrożnie. Zapoznaj się z zalecaną poniżej tabelą natężenia światła, dostosuj intensywność światła zgodnie z kolorem skóry i włosów na ciele i utrzymuj się w wygodnym stanie.

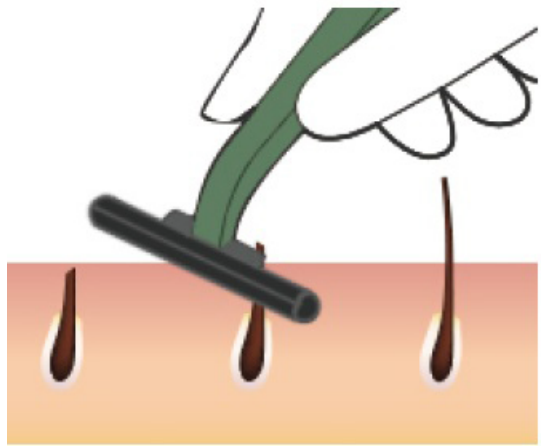


Propozycja użycia

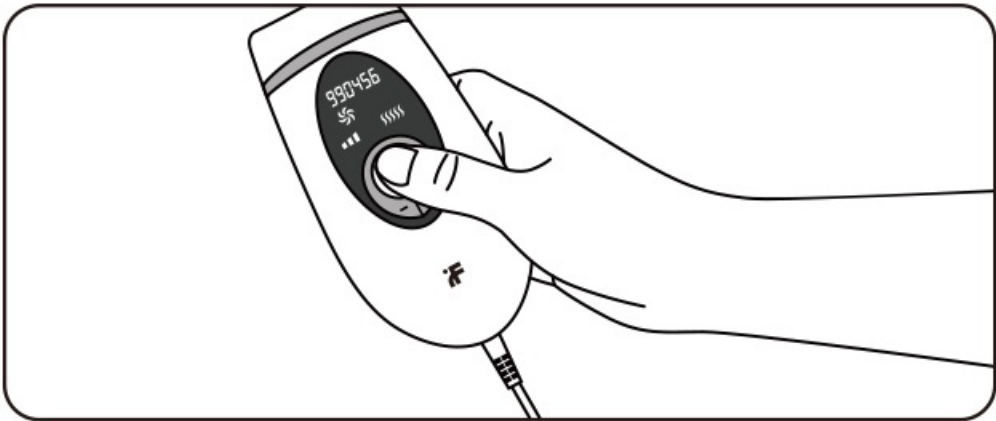


1. Podłącz zasilacz i długo naciśnij klawisz, aby uruchomić maszynę.

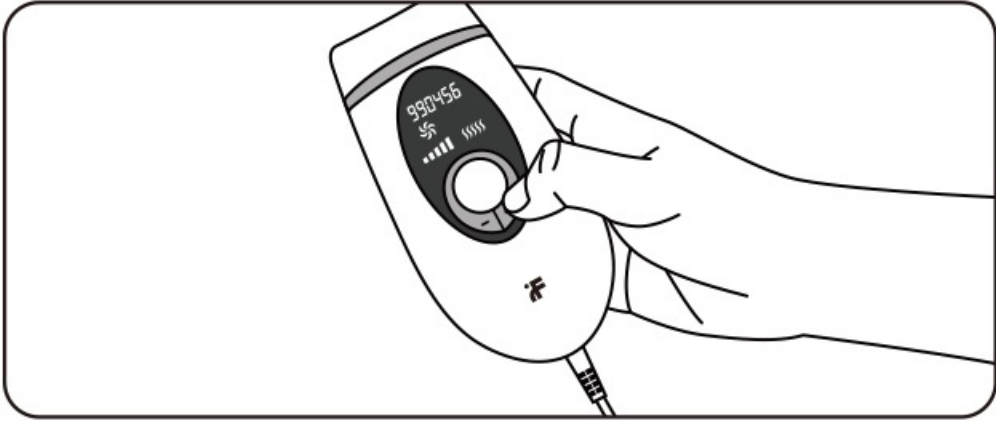


2. Krótco naciśnij klawisze „+” i „-”, aby wyregulować ustawienie intensywności światła; Wybierz odpowiedni poziom zgodnie z własną sytuacją. Im wyższy poziom, tym lepszy efekt. Nobice sugeruje rozpoczęcie od najniższego poziomu.

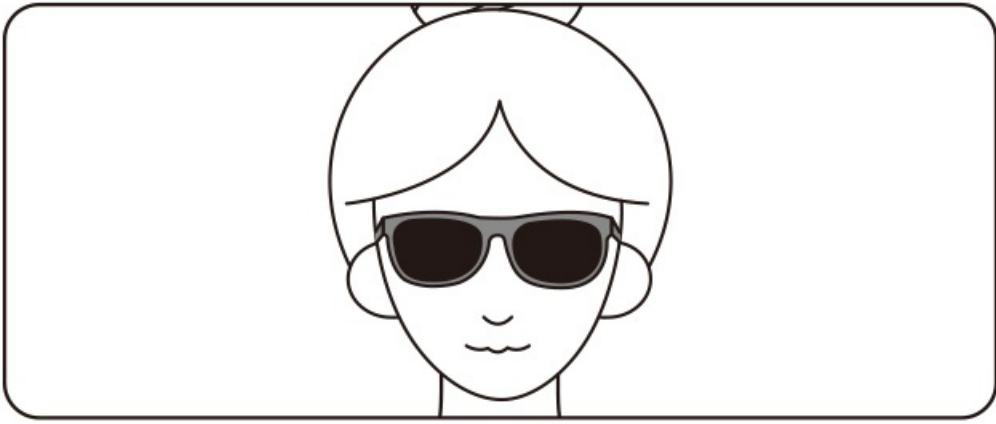


3. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne, które znajdują się w pudełku prezentowym, aby chronić oczy.

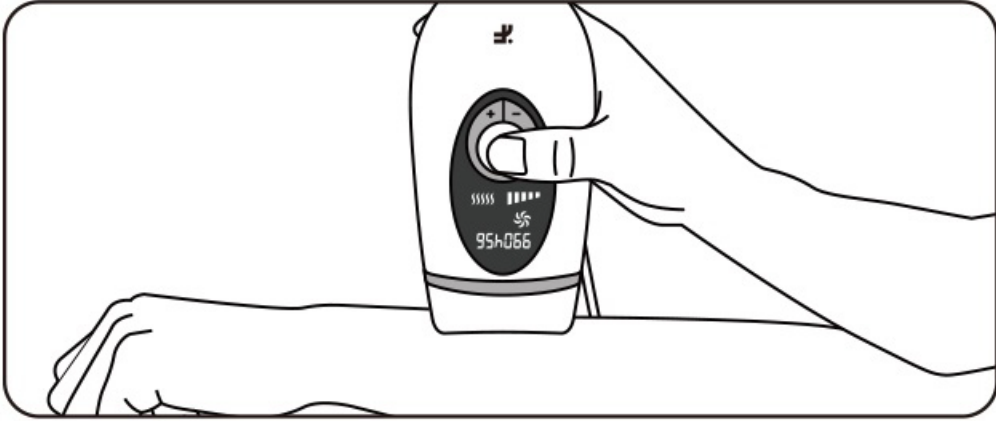

4. Nałóż produkt pionowo na skórę, naciśnij krótko przycisk i zacznij rozjaśniać i depilować.

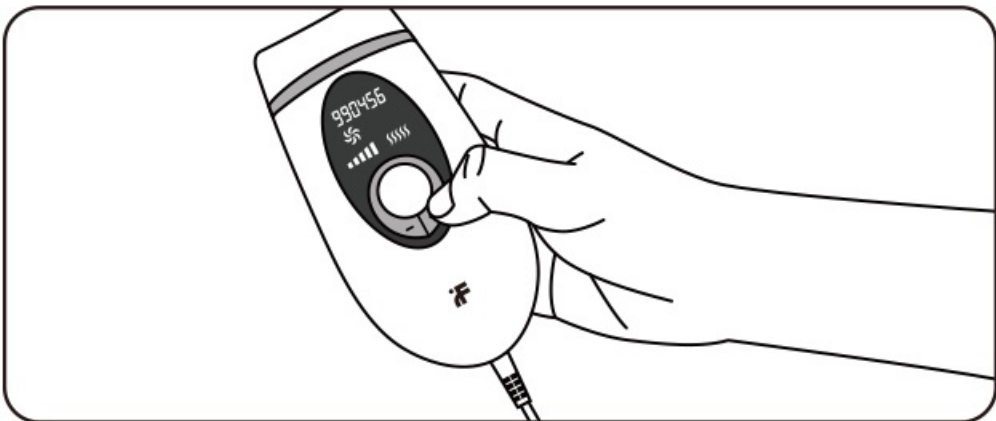

5. Domyślnym trybem uruchamiania tego produktu jest tryb ręczny. Długie naciśnięcie klawisza „+” lub „-” powoduje przejście do trybu automatycznego (w trybie automatycznym produkt może w sposób ciągły oświetlać i depilować przy kontakcie ze skórą, w odstępach 2-3 sekund dla każdego iluminacji_ i przejść do depilacji .

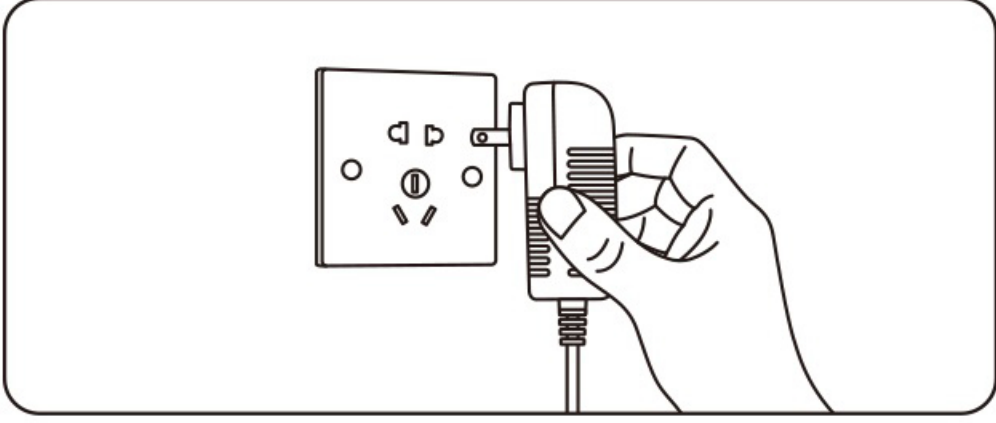

6. Po depilacji naciśnij długi klawisz, aby wyłączyć produkt i wyciągnij zasilacz.


Widmowe odniesienie miernika natężenia światła

Hair color	White/grey	Red	Beige	Light blond	Brown	Dark brown	Black
Skin color							
White	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Beige	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Light brown	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Brown	⊗	⊗	⊗	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, zmniejsz intensywność światła.

Zalecane natężenie światła (1-5)

W poniższej tabeli „X” oznacza, że ten produkt nie nadaje się do użytku 5 jest zalecany do oświetlania części depilowanych: nóg, pach, ramion, czoła itp

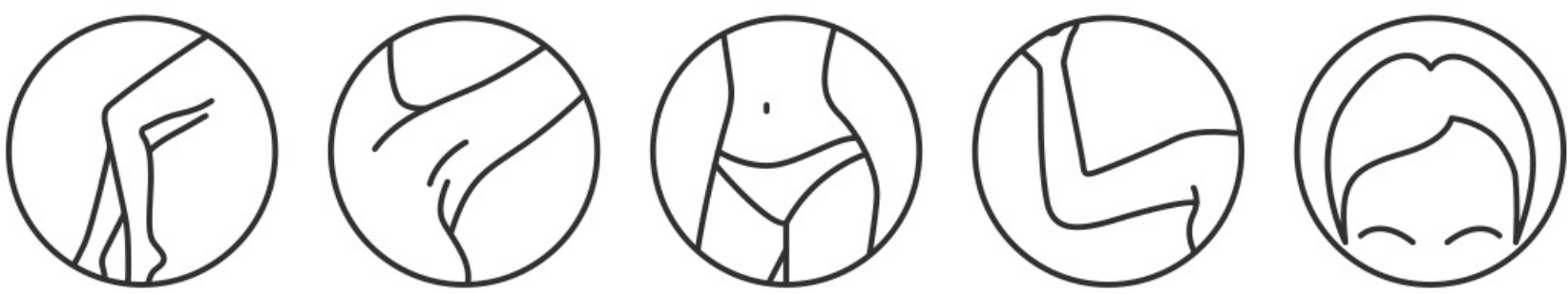

UWAGA:

Użytkownicy płci męskiej: nie używaj produktu na twarzy z brodą lub męskimi narządami płciowymi. Nie stosować wokół oczu, w pobliżu brwi, nozdrzy, wewnętrznych uszu lub odbytu. Kobiety: sutki, otoczka, wargi sromowe mniejsze, pochwa, nie używać.