


inFace RF Beauty Instrument

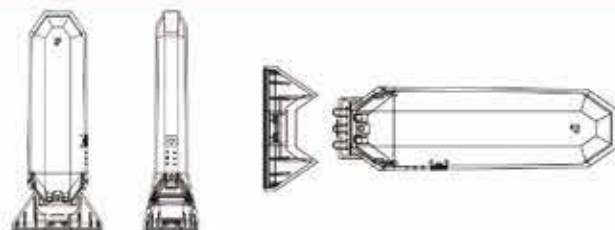

MS6000 Cechy

1. Przeciw starzeniu się
2. Głowica tytanowa na poziomie medycznym
3. Wydajność potwierdzona wynikiem testu SGS
4. Wielobiegunowe interakcje RF

Product Specifications

Model	MS6000
Nazwa	inFace RF Beauty Instrument
Rozmiar produktu	154mm*63mm*39mm
Waga netto	About 125g
Pojemność baterii	1500mAh
Napięcie robocze	DC 3.7V
Prąd roboczy	DC3.7V_1000 mA
Moc	8W
Prąd czuwania	<3uA
Częstotliwość pracy	1M Hz
Tryb ładowania	USB DC 5V
Prąd ładowania	600mA
Czas ładowania ciągle	About 2.5h
Czas pracy	<60 Minutes
Zakres temperatur Pracy	0°C~40°C
Materiał / składnik	Titanium Head, ABS, PC, Silicone

inFace RF Beauty Instrument



Działanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie z sygnałem dźwiękowym.
2. Krótkie naciśnięcie przełącza na trzy poziomy siły, wysoki-średni-niski, z sygnałem dźwiękowym i białą diodą LED.
3. W stanie włączonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, emitując sygnały dźwiękowe.
4. Dzięki inteligentnej funkcji pomiaru czasu przyrząd może automatycznie wyłączyć się po 10 minutach, gdy jest włączony.
5. Dzięki funkcji automatycznej pamięci przyrząd może automatycznie zapisać ostatni poziom użycia jako domyślny dla następnego uruchomienia.



Long press the button



Three level adjustable

Sposób użycia



Przejdź od obojczyka do żuchwy (omijając gardło)

Krąży od żuchwy do ucha



Krąży od fałdów nosowo-wargowych do kości policzkowych

Przesuwając się od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego kącika oka poprawiaj końcówkę oka i brwi (omijaj gałkę oczną i powiekę)



Uwaga

1. Nie używaj instrumentu do obszaru tarczycy ani obszarów limfatycznych;
2. Nie używaj instrumentu do łusek, gałek ocznych, uszu, górnych części powiek, skroni;
3. Podczas korzystania z instrumentu należy zachować ostrożność w miejscach o cienkiej skórze i z rozłożonymi naczyniami krwionośnymi, takimi jak kąciki oczu, czoło, szyja, usta i pieszczęle;
4. Osobom o wrażliwej skórze zaleca się stosowanie niskiej mocy;
5. W ciągu jednej godziny przed użyciem urządzenia nie używaj łatwopalnych płynnych produktów do pielęgnacji skóry, takich jak alkohol, aceton, perfumy, środki dezynfekujące itp. ;
6. Poza powyższymi pięcioma zasadami, inne ostrzeżenia, patrz podręcznik