


inFace Ultrasonic Ion Cleansing Instrument

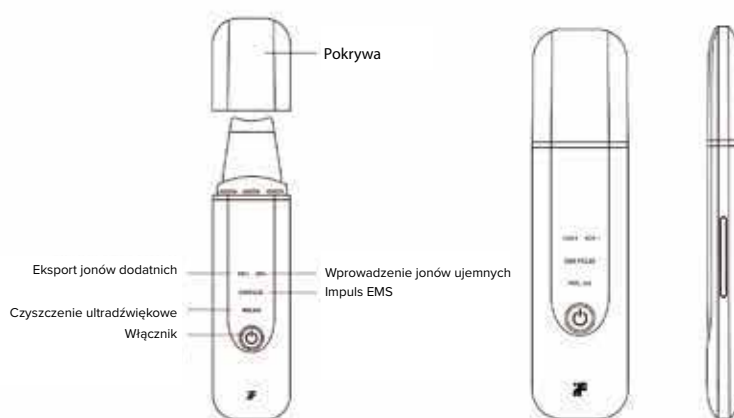

MS7100 Cechy

1. Ultradźwiękowy środek czyszczący
2. Dokładne czyszczenie
3. Wprowadzenie do odżywienia
4. Masaż relaksacyjny (tryb EMS Pulse)

Specyfikacja produktu

Model	MS7100
Nazwa	Ultrasonic Ion Cleansing Instrument
Pojemność baterii	500mA
Napięcie robocze	3.7V
Moc znamionowa	1.5W
Rozmiar produktu	172mm*42mm*15mm
Rozmiar paczki	220mm*63mm*40mm
Waga netto	About 85g

inFace Ultrasonic Ion Cleansing Instrument



Wskazówki

■ Czyszczenie

Tryb czyszczenia ultradźwiękowego - PEELING
(Stosować ze środkiem do mycia twarzy / płynem do mycia twarzy)

1. Zwilż twarz ciepłą wodą i użyj środka do mycia twarzy / płynu do mycia twarzy, aby wytworzyć pianę.
2. Naciśnij długo przycisk, aby włączyć, domyślnie jest to tryb PEELING.
3. Trzymaj łopatkę twarzą do wewnątrz, łopatką skierowaną w dół i blisko skóry. Powoli przesuwaj głowicę łopaty w kierunku przeciwnym do porów przez 3 minuty.



■ Głębokie oczyszczanie

Głębokie oczyszczanie
Tryb eksportu jonów dodatnich - ION +
(używaj z tonerem / balsamem)

1. Nałóż odpowiedni tonik / balsam na twarz.
2. Naciśnij krótko przycisk, aby wybrać tryb ION +.
3. Trzymaj łopatkę twarzą do wewnątrz, łopatką do góry i blisko skóry. Powoli przesuwaj łopatkę w kierunku przeciwnym do kierunku porów, aby głęboko oczyścić skórę przez 3 minuty, a następnie spłucz twarz ciepłą wodą.



■ Wprowadzenie do odżywienia

Tryb wprowadzania jonów ujemnych - ION -
(używaj z esencją / emulsją / maskami)

1. Nałóż odpowiednią esencję / emulsję na twarz.
2. Wybierz tryb ION.
3. Trzymaj łopatkę twarzą na zewnątrz, łopatką do góry i blisko skóry. Powoli przesuwaj głowicę łopaty zgodnie z kierunkiem porów, aby masować przez 3 minuty.



■ Masaż wygładzający

Tryb EMS Pulse - EMS PULSE
(stosować z kremem ujędrniającym)

1. Utrzymuj wilgotną twarz.
2. Wybierz tryb EMS PULSE.
3. Trzymaj łopatkę twarzą na zewnątrz, łopatką do góry i blisko skóry. Przesuwaj głowicę łopaty powoli zgodnie z kierunkiem porów, aby uspokajająco masować przez 3 minuty.



■ Przypomnienie

- Podczas korzystania z przyrządu, należy trzymać pasek czujnika jonów z boku; trzymaj łopatkę w kontakcie ze skórą, aby zapewnić normalne działanie EMS i jonów.
- Kąt nachylenia łopaty powinien być ustawiony tak, jak pokazano na rysunku (około 45 stopni).
- Nie trzymaj łopaty w tym samym miejscu przez długi czas, wyjmij ją powoli.
- Jeśli na twarzy jest stan zapalny, używaj go do ustąpienia objawów.
- Zaleca się 2-3 razy w tygodniu. Nie używaj go kilka razy dziennie.
- Utrzymuj łopatkę i narzędzie w czystości podczas pracy.



■ Czyszczenie i konserwacja

- Nie czyścić przyrządu ostrymi lub żrącymi, lotnymi rozcieńczalnikami.
- Instrument można delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką lub wacikiem.
- Nie płucz instrumentu bezpośrednio wodą.
- Jeśli instrument nie jest używany przez dłuższy czas (około 3 miesiące), należy go w pełni naładować i przechowywać, aby uniknąć uszkodzenia baterii z powodu braku prądu.

Nieodpowiednie dla następujących osób:

- Kobiety w ciąży lub menstruujące.
- Osoby z alergiami. Osoby z chorobami skóry, zapaleniem skóry, alergiami skórными i ciężkimi oparzeniami słonecznymi.
- Osoby z uszkodzeniami skóry, egzemą, obrzękiem itp.
- Ludzie wracający do zdrowia po operacji.
- Ludzie, którzy mieli operację plastyczną.

- Ludzie, którzy niedawno przeszli operacje związane z odmładzaniem laserem, dermabrazją chemiczną lub gojeniem ran.
- Pacjenci z wrodzonymi wadami serca.
- Ludzie z zaburzeniami nerwu twarzowego.
- Ludzie, którzy piją alkohol, zażywają leki. Osoby przemęczone lub są złym stanie zdrowia.