




oclean

OcClean Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Instrukcja obsługi

Ważne wskazówki

- ▲ Światło UVC-LED znajduje się po wewnętrznej stronie sterylizatora. Aby uniknąć obrażeń, nie należy demontować urządzenia ani patrzeć na światło UVC pod jakimkolwiek nietypowym kątem, gdy sterylizator jest w stanie roboczym.
- ▲ UVC to niewidzialne światło, widoczne fioletowe światło pochodzi ze wskaźnika pracy.
- ▲ Aby uniknąć obrażeń, prosimy o mocowanie urządzenia do ściany, a nie pozostawianie go w niewłaściwych miejscach, nie używaj go poza zakresem użytkowania.
- ▲ Użyj oryginalnej naklejki ściennej, zamontuj urządzenie na naklejce ściennej, aby uruchomić wyłącznik zasilania, aby aktywować urządzenie.

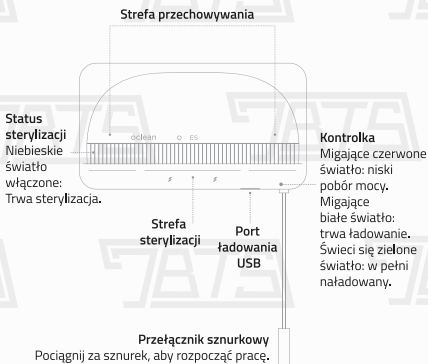

Uwaga:

Gdy jednostka główna jest oddzielona od uchwyty ściennego, urządzenie automatycznie wyłączy się, a sterylizator nie będzie działał; Jednostka główna może być ładowana, gdy jest zawieszona lub zdjęta.

- Czyszczenie urządzenia

Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą w przypadku awarii obwodu. Do czyszczenia zaleca się użycie wilgotnej szmatki.

- Montaż naklejki ściennej

Ustaw odpowiednią wysokość na ścianie, pamiętaj, aby zostawić wystarczająco dużo miejsca na powieszenie szczoteczek do zębów.

Upewnij się, że miejsce klejenia jest suche i czyste (nadaje się do gładkich powierzchni, takich jak ceramika, szkło itp.). Miej oko na prawidłowe kierunki góra/dół. Przyklej naklejkę do ściany, lekko dociśnij, aby upewnić się, że jest stabilnie przymocowana.

1



2



3



Oderwij naklejkę

Trzymaj się ściany

Zainstaluj sterylizator

- Zasilanie włącz / wyłącz

Po zamontowaniu urządzenia na naklejce, pociągnij raz za sznurek, aby rozpocząć sterylizację, urządzenie automatycznie zatrzyma się po zakończeniu sterylizacji. Autosterylizacja przebiega co 6 godzin. Po zdjęciu urządzenia z naklejki ściennej urządzenie wyłączy się automatycznie.

- Przełącznik strunowy

Pociągając za sznurek podczas procesu sterylizacji, automatycznie przestanie działać; Pociągnięcie przełącznika w stanie spoczynku spowoduje uruchomienie procesu sterylizacji; Autosterylizacja jest uruchamiana co 6 godzin po zakończeniu pierwszej ceny sterylizacji.

- Inteligentny zegar sterylizacji

W trybie gotowości automatyczna sterylizacja przebiega co 6 godzin, a następnie jest kontynuowana.

- Więcej informacji

To urządzenie jest przeznaczone głównie dla Oclean i innych głównych marek elektrycznych szczoteczek do zębów. Nie ma gwarancji, że będzie kompatybilny ze wszystkimi szczoteczkami do zębów na rynku.

• Parametry Produktu

Nazwa produktu	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Panel ładujący	USB-A to USB Type-C
Specyfikacja ładowania	5V= 0.6A
Pojemność baterii	1000mAh
Moc wejściowa	3W
Praca	Automatyczna dezynfekcja co 6 godzin
Instalacja	Montowane do ściany
Czas ładowania	2.5 Hour
Standardy wykonawcze	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

- Ważne:

1. Może być zasilany wyłącznie bezpiecznym niskim napięciem odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich użytkowanie. bezpieczeństwo.
3. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
4. To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymieniać.



Nazwa części	Substancje lub pierwiastki toksyczne i szkodliwe						Termin Ochrony Środowiska
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Plastikowe Części	○	○	○	○	○	○	10 lat
Elementy konstrukcyjne	×	○	○	○	○	○	
PCBA	×	○	○	○	○	○	
Kabel zasilający	×	○	○	○	○	○	
Akcesoria	○	○	○	○	○	○	5 lat

Uwagi

○ Oznacza to, że zawartość substancji toksycznej i szkodliwej we wszystkich jednorodnych materiałach składnika jest poniżej limitu określonego w GB / T 26572-2011.

×

Oznacza to, że zawartość substancji toksycznej i szkodliwej w co najmniej jednym nieznanym materiale jednorodnym przekracza wymagania graniczne określone w GB/T 26572-2011.

* Z wyjątkiem niewielkiej liczby materiałów, które nie zostały wymienione ze względu na rozwój techniczny, większość materiałów to materiały przyjazne dla środowiska. Zachęcamy do korzystania z tego produktu w okresie użytkowania ochrony środowiska.

Jeśli okaże się, że zakupiony przez Ciebie produkt ma wadę lub wadę, prosimy o kontakt.

Ameryka północna:

E-mail: support.us@oclean.com

Inny region:

E-mail: service@oclean.com

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer's address: #32G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Production address: No. 89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China