

Ultradźwiękowy skaler dentystyczny



Instrukcja


Model: T11 Pro

pl

1 Opis produktu

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Ten produkt to nowy rodzaj wizualnego skalera ultradźwiękowego. Produkt charakteryzuje się podłączeniem telefonów komórkowych i tabletów oraz innych urządzeń, aby intuicyjnie zrozumieć stan zębów za pośrednictwem aplikacji. Wykorzystuje technologię rezonansu ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości do usuwania przebarwień na zębach i uzyskania efektu wybielenia i ochrony zębów.

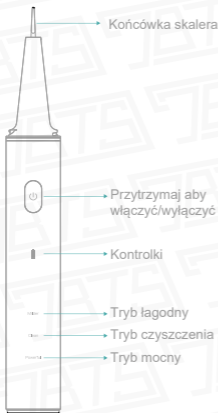

Funkcje przycisków

Przycisk zasilania:

przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć,
krótkie naciśnięcie aby zmienić tryb

Krótkie naciśnięcie aby zmienić tryb:
ładowny/czyszczenia/mocny

LED:

Włączony: Zielone światło miga
Połączony z Wifi: Zielone światło
włączone

LED:

Słaba bateria: czerwone światło miga
Ładowanie: czerwone światło
włączone
Naładowana: światło wyłączone

2 Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru i uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności

1. Ten produkt ma wbudowaną baterię. Nie wrzucaj tego produktu do ognia ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować wybuch baterii.
2. Nie używaj tego produktu podczas ładowania.
3. Nie używaj tego produktu, jeśli port ładowania nie jest odpowiednio zakryty.
4. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie.
5. Nie umieszczaj pieniędzy na ładowanie tego produktu w wilgotnym środowisku ani w wodzie.
6. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu dostępnym dla dzieci i niemowląt.
7. Nie upuszczaj ani nie uderzaj/wstrząśnij produktem.
8. Nie używaj tego produktu podczas kąpieli lub kąpieli w gorących źródłach.
9. Osoby z ciężkim zapaleniem przyzębia, których zęby są leczone lub obawiają się objawów dyskomfortu w jamie ustnej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
10. Do czyszczenia tego produktu nie używaj rozcieńczalnika do farb, benzenu ani innych chemikaliów.
11. Przy pierwszym użyciu tego produktu może wystąpić niewielkie krwawienie, ponieważ korzeń zęba jest po raz pierwszy narażony na tego rodzaju podrażnienie, co jest normalne. W przypadku silnego krwawienia należy natychmiast zaprzestać używania tego produktu. Proszę również skonsultować się z lekarzem.

3 Kroki


Krok pierwszy:

Zeskanuj kod QR telefonem komórkowym i pobierz aplikację
(Android 4.4, iOS9.0 lub nowszy)



Krok drugi:

- 1 Otwórz aplikację, kliknij w prawym górnym rogu **+** Dodaj urządzenie
- 2 Powiąż urządzenie do wizualnego skalowania: naciśnij i przytrzymaj produkt przez trzy sekundy, aby włączyć, i sprawdź powyższe kroki, aby zakończyć. Kliknij, aby rozpocząć łączenie.

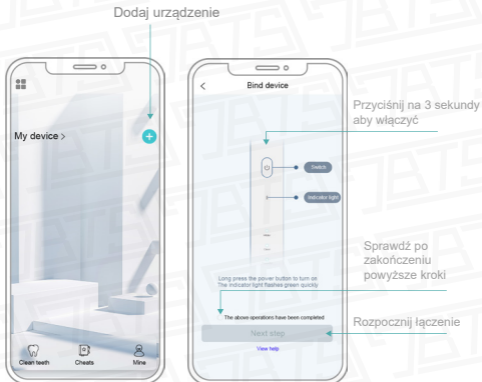

Krok trzeci:

Kliknij, aby rozpocząć połączenie i przejść do ustawień telefonu komórkowego - bezprzewodowa sieć LAN.

Połącz się z Wi-Fi: SUNUO-T11-XXXX Hasło: 12345678



3 Wprowadzenie do produktu

Zastrzeżenie:

Ten produkt należy do zasady działania ultradźwięków. Po włączeniu nie będzie wytwarzał wibracji o wysokiej częstotliwości, gdy dotknie działel lub miękkih przedmiotów, i będzie miał oczywistą wydajność pracy, gdy dotknie zębów lub twardych przedmiotów, aby wytworzyć rezonans o wysokiej częstotliwości!

W zależności od potrzeb wybierz odpowiedni tryb pracy.

Milder Mode: miękka moc dla wrażliwych zębów, małe plamy nazębne

Clean Mode: normalna moc dla uporczywego kamienia nazębnego, takiego jak plamy z dymu, plamy z kawy, plamy z herbaty itp.

Powerful Mode: Silna moc do głębokiego czyszczenia, takich jak uformowany kamień nazębny, twarde plamy nazębne.

Często zadawane pytania

1. Czy krwawienie dziąseł jest normalne podczas użytkowania?

Odpowiedź: Jeśli używają go ludzie z paradontozą lub zapaleniem dziąseł lub łatwo jest spowodować krwawienie dziąseł, w tym mycie zębów lub gryzienie twardego jedzenia, również krwawią. Jeśli dziąsła krwawią podczas używania tego produktu, po prostu przestań go używać i splucz zimną wodą.

2. Czy to normalne, że końcówka czyszczącego zęba nagrzewa się podczas użytkowania?

Odpowiedź: Podczas używania energia elektryczna jest zamieniana na energię kinetyczną i normalnym zjawiskiem jest nieznaczny wzrost temperatury skalera.

3. Czy to normalne, że produkt czasami wydaje dźwięk?

Odpowiedź: Dźwięk podczas pracy jest spowodowany rezonansem końcówki roboczej i zębów, co jest zjawiskiem normalnym.

4. Czy to normalne, że produkt nagle przestaje działać podczas pracy ultradźwiękowej?

Odpowiedź: Produkt jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania, która zatrzyma pracę przetwornika po 10 minutach pracy przetwornika i konieczności ponownego przełączenia biegu, aby rozpocząć pracę.

Rozwiązywanie problemów

1. Brak odpowiedzi podczas uruchamiania, a kamera się nie włącza.

W pełni naładuj przed użyciem.

2. Awarie aplikacji

Wyczyść tło telefonu komórkowego i uruchom ponownie aplikację.

3. Miga czerwone światło skalera

Produkt ma niski poziom naładowania, użyj go po naładowaniu.

4. Produkt nie wyświetla normalnie obrazów w czasie rzeczywistym po pomyślnym połączeniu z aplikacją Sunuo

Odłącz połączenie WIFI między telefonem komórkowym a skalerem, uruchom ponownie urządzenie lub wyczyść tło, ponownie otwórz aplikację i ponownie połącz się z Wi-Fi.

5. Połączenie WiFi jest niestabilne lub nie pojawia się obraz.

Uruchom ponownie urządzenie i ponownie połącz się z aplikacją

* Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany zgodnie z powyższymi operacjami, skontaktuj się z obsługą klienta, a my przedstawimy Ci praktyczne rozwiązania.

Parametry produktu

Nazwa
Intelligent visual
ultrasonic dental scaler

Numr produktu
T11 Pro

Standard sieci
IEEE 802.11b/g/n

Częstotliwość pracy
2.4GHz

Szybkość przesyłania obrazu
30fps

Czujnik obrazu
CMOS

Temperatura pracy
-10~50 °C

Bateria
1200mAh

Żywotność baterii
-ok. 90 minut

Czas ładowania
About 1.5h -2h

Parametry wejściowe
5v == 0.5A

Napięcie robocze
5V

Moc robocza
1.68W

Pixele
5MP

Najlepsze skupienie
0--2CM

Made in China

