


Instrukcja obsługi



Mamoda Smart Neck Massager

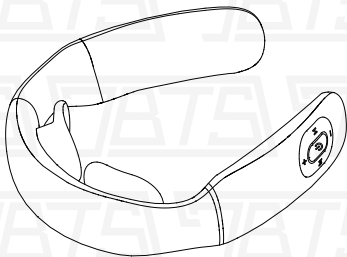

Spis treści



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	14
PRZEGLĄD/STRUKTURA	19
OPERACJE	20
ŁADOWANIE	22
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	23
KONSERWACJA	24
SPECYFIKACJA	25

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłową instalację i obsługę. Proszę zachować tę INSTRUKCJĘ OBSŁUGI na przyszłość.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


Przed użyciem przeczytaj uważnie ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, aby upewnić się, że prawidłowe działanie tego urządzenia. Środki ostrożności i ostrzeżenia wymienione poniżej pomogą zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia. Klasy wypadków spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem są podzielone na OSTRZEŻENIA i PRZESTROGI. Przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIA i PRZESTROGI poniżej i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji

	OSTRZEŻENIA	Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkownika.
	PRZESTROGI	Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkownika, lub uszkodzenia produktu


	Zabroniony		Nie demontować
---	------------	---	----------------

Nie nadaje się dla osób:


Ścisły nadzór jest konieczny, gdy ten produkt jest używany przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych (musi być nadzorowany)

 OSTRZEŻENIA	Jeżeli u osób korzystających z produktu występują poniższe warunki zalecamy konsultacje z lekarzem przed użyciem.
	<ul style="list-style-type: none"> # Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub wszczepami elektronicznymi. # Osoby w trakcie leczenia, zwłaszcza te, które nie czują się dobrze. # Osoby z nowotworami złośliwymi, ropniakami, nadciśnieniem lub chorobą serca (wymaga nadzoru). # Kobiety w ciąży lub miesiączkujące. # Osoby z osteoporozą, zniekształceniami stawów, dysfunkcją lub niedawnymi złamaniami. # Osoby z poważnymi lub zranionymi chorobami skóry. # Ścisły nadzór jest konieczny, gdy ten produkt jest używany przez, na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych. # Osoby z chorobami zakaźnymi, lub Ci, którzy biorą leki. # Osoby uczulone na podkładki kontaktowe ze stali nierdzewnej


Kontroler

 PRZESTROGI	<ul style="list-style-type: none"># Nie obsługiwać kontrolera mokrymi rękoma ani nie ciągnąć na siłę przewodu zasilacza.# Nie wlewaj wody ani innych płynów do kontrolera, aby uniknąć zalania.# Nie kładź ciężkich przedmiotów na kontrolerze
---	--

Otoczenie

 PRZESTROGI	<ul style="list-style-type: none"># Nie używaj tego urządzenia, gdy temperatura przekracza 40°C.# Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub zakurczonym środowisku.# Odłącz od gniazdka podczas burzy z piorunami.# Nie umieszczaj na zewnątrz.# Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w bezpośrednim świetle słonecznym.# Nie moczyć tego produktu w wodzie.# Nie używaj tego produktu w pobliżu fal krótkich lub mikrofal urządzenia
---	---

Przestrogi dotyczące złączy zasilania i przewodu zasilającego

 PRZESTROGI	<ul style="list-style-type: none"># Masażer należy ładować tylko w ramach określonego napięcia.# Nie używaj mokrej ręki do odłączania przewodu zasilającego, aby uniknąć wstrząsu elektrycznego.# Nie ciągnij za przewód, sięgnij do wtyczki, aby go odłączyć.# Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie uszkodzaj, nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj mocy!
--	---





PRZESTROGI

- # Nie kładź na produkcie ciężkich przedmiotów.
- # Nie wywieraj nacisku na serce podczas korzystania z tego produktu, w przeciwnym razie może powodować dyskomfort.
- # Pozbądź się opakowań plastikowych w prawidłowy sposób i upewnij się, że dzieci nie będą się z nimi bawić.
- # Nie używaj produktu bezpośrednio po posiłku, może to spowodować dyskomfort.
- # Jeśli odczuwasz jakikolwiek nienormalny dyskomfort podczas pracy ten produkt, natychmiast przestań używać.
- # Nie używaj go podczas długich sesji, aby uniknąć dyskomfortu.
- # Jeśli odczuwasz jakikolwiek nienormalny dyskomfort podczas pracy ten produkt, natychmiast wyłącz zasilanie i nie używaj!
- # Nie przykrywaj produktu dywanikami lub poduszkami podczas użytkowania, aby uniknąć przegrzania lub wywołania pożaru.
- # Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas użytkowania, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć produkt, aby uniknąć zagrożeń po ponownym włączeniu zasilania.
- # Nie próbuj naprawiać ani demontować urządzenia bez pozwolenia.
- # Ten produkt zawiera specjalny akumulator, nie należy go wyjmować z produktu w celu naładowania ani używać w innym produkcie.
- # Nie wkładaj go do otwartego ognia, aby uniknąć przegrzania.
- # Proszę prawidłowo obchodzić się z produktem, aby uniknąć uszkodzeń.
- # Nie łącz dwóch zacisków akumulatora bezpośrednio z przewodzącym metalem.
- # Nie przechowuj tego produktu z naszyjnikiem lub spinkami do włosów.
- # Wymontowaną baterię należy przechowywać z dala od małych dzieci i dzieci, aby zapobiegać urazom.
- # Natychmiast udaj się do szpitala, jeśli Twoje dziecko połknie baterię.
- # Jeśli dojdzie do wycieku z baterii, unikaj kontaktu z gołą skórą, aby zapobiec poparzeniom chemicznym.




PRZESTROGI

- # Nie przesuwaj miejsca podkładek kontaktowych podczas używania, upewnij się, że wyłączyłeś zasilanie przed zmianą miejsca. # Proszę zdjąć urządzenia elektroniczne podczas korzystania z tego produktu, może to spowodować awarię urządzenia.
- # Jeśli podczas użytkowania wystąpi usterka, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć produkt i skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu w celu naprawy.
- # Nie używaj tego produktu podczas jazdy, aby uniknąć wypadku.
- # Nie skupiaj podkładek kontaktowych na zranionych częściach ciała, aby uniknąć zapalenia skóry.
- # Nie dopuść do kontaktu podkładek kontaktowych z metalem przedmioty podczas użytkowania. Aby uniknąć dyskomfortu, załóż 2 małe podkładki kontaktowe po obu stronach kręgosłupa szyjnego i nie przesuwaj ich podczas użytkowania.
- # To normalne, że produkt jest gorący po długim czasie pracy.
- # Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- # Sprawdź podkładki kontaktowe przed użyciem, jeśli są jakieś uszkodzenia, nie używaj ich, aby uniknąć wypadku.
- # Używaj tego produktu wyłącznie na przeznaczonych do tego częściach ciała.
- # Nie używaj razem z tym innego urządzenia terapeutycznego.
- # W przypadku kontaktu z przeciekającą baterią należy dokładnie spłukać skórę wodą. Narażenie skóry wymaga dokładnego nawodnienia i wizyty u lekarza.
- # Urządzenie należy demontować wyłącznie w celu utylizacji. Skontaktuj się z autoryzowaną sprzedawcą lub serwisem w celu naprawy.
- # Baterie można poddać recyklingowi po użyciu, należy je poddać recyklingowi bateria litowa poprzez programy lokalne

 ZABRONIONY	<ul style="list-style-type: none"># Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzone, odsłonięte części lub wycieki zasilania.# Nie należy stawać na produkcie ani układać na nim ciężkich przedmiotów.# Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się masażerem.# Unikaj używania produktu pod wpływem alkoholu.# Nie wkładaj rąk ani ciał obcych do otworów urządzenia, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. # Jeśli podczas pracy pojawi się dym lub nietypowy zapach, natychmiast przestań używać.
 NIE DEMONTOWAĆ	<ul style="list-style-type: none"># Nie demontuj tego produktu, aby uniknąć awarii.# Nie próbuj naprawiać ani demontować urządzenia bez pozwolenia. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem

Jest to znakomity inteligentny masażer szyi z przenośnym, bezprzewodowym, ergonomicznym kształtem. Elastyczne ramiona w kształcie litery U umożliwiają idealne dopasowanie do szyi. Masaż pulsacyjny o niskiej częstotliwości z kojącym ciepłym ciepłem pomaga złagodzić ból szyi, zmęczenie i napięcie, promować krążenie krwi. 5 technik masażu i 16 intensywności masażu zaspokoi Twoje różne potrzeby w zakresie masażu

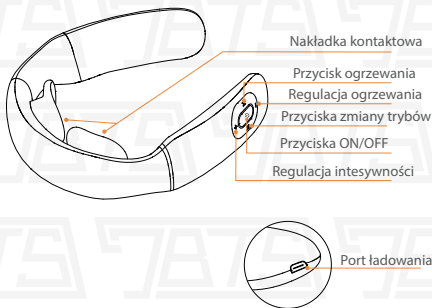

PRZESTROGA

Ten masażer jest wyposażony w funkcję grzania, osoby o obniżonej odczuwalności ciepła powinny zwracać na to uwagę

1. Załóż masażer na szyję.
2. Ten masażer domyślnie działa w języku chińskim. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć masażer, komunikaty głosowe trybu automatycznego „włączanie”, kolorowy wskaźnik świeci światłem ciągłym.
3. Przytrzymaj i naciśnij jednocześnie przycisk [⊕] i przycisk [M], aby przełączyć się na komunikat głosowy w języku angielskim.
4. Gdy masażer jest włączony, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk [⊕], aby wyłączyć masażer, pojawi się komunikat głosowy „Dziękujemy za użycie”.
5. Gdy masażer jest włączony, naciśnij krótko przycisk [H], aby przejść przez: poziom ciepła wysoki - ogrzewanie wyłączone - poziom ciepła niski - poziom ciepła wysoki; naciśnij i przytrzymaj przycisk [H], aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania, przy każdej operacji pojawia się komunikat głosowy.
6. Krótko naciśnij przycisk [M], aby przejść przez: tryb automatyczny - tryb stukania - tryb skrobania - tryb akupunktury - tryb tuiny; przy każdej operacji pojawia się monit głosowy.
7. Intensywność masażu zmienia się na poziom 1 podczas przełączania trybów.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby włączyć/wyłączyć funkcję monitowania głosowego. Monitowe włączenie/wyłączenie będzie słyszalne wraz z operacją. Po wyłączeniu funkcji nie będzie słycać monitu

9. Krótkie naciśnięcie przycisku [+] na masażerze, aby zwiększyć intensywność impulsu (od poziomu 1 do 16 ustawień intensywności), przy każdej operacji pojawia się monit głosowy; krótkie naciśnięcie przycisku [-] na masażerze, aby zmniejszyć intensywność impulsu (od poziomu 16 do 1 ustawienia intensywności), przy każdej operacji pojawia się komunikat głosowy, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk [-], aby wyłączyć funkcję pulsu.

10. Podłącz kabel USB do ładowania, masażer przestanie działać po podłączeniu do zasilania, wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono, a po zakończeniu ładowania zmieni kolor na stały zielony.

11. Masażer nie może działać podczas ładowania.

12. Kontrolka miga na czerwono, gdy poziom baterii jest niski; urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy moc będzie bardzo niska; pełne naładowanie zajmie około 1,5 godziny

O ładowaniu

1. Podłącz adapter DC5V do masażera, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka, masażer rozpoczyna ładowanie; Wskaźnik LED świeci na czerwono, gdy masażer jest ładowany; Lampka kontrolna LED zmienia kolor na zielony, gdy masażer; zakończone ładowanie.
2. Naładuj masażer tylko w określonym napięciu lub możesz podłączyć masażer do portu USB komputera do ładowania.
3. Masażer nie może działać podczas ładowania.

Porady dotyczące ogrzewania

- Proszę zmoczyć szyję przed użyciem (wodą lub balsamem).
- Załóż 2 małe podkładki kontaktowe po obu stronach odcinka szyjnego kręgosłupa i nie przesuwaj ich podczas używania, aby uniknąć dyskomfortu.
- Naciśnij przycisk zasilania i dostosuj ustawienia intensywności do swoich upodobań.
- Zalecamy zacząć od niskiej prędkości/intensywności, stopniowo ją zwiększać i przechodzić przez prędkość/intensywność.
- Nie zaleca się używania urządzenia dłużej niż 30 minut (2 sesje), aby uniknąć bólu mięśni lub nerwów. Jeśli odczuwasz nienormalny dyskomfort, nie używaj produktu

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z masażerem szyi, możesz użyć następującej wiadomości, aby pomóc Ci rozwiązać typowe problemy:

Objawy	Możliwe przyczyny i roz
Urządzenie nie uruchamia się	Niski poziom naładowania baterii, naładuj masażer Guzik zasilania jest na OFF, przełącz włącznik
Brak wskaźnika ładowania	Sprawdź gniazdo ładowania i podłącz masażer
Urządzenie jest włączone, ale nie masuje	Brak styku pomiędzy szyją, a padem masującym
	Coś znajduje się pomiędzy padami masującymi a szyją
	Ustawienie intensywności masażu jest za niskie, zwiększ je.
Uczucie klucia	Dodatkowy czas masażu, zalecamy sesje po 15 min.
	Masaż jest zbyt mocny, zmniejsz intensywność
	Twoja skóra jest zbyt sucha, nałóż mokry ręcznik na szyję przed masażem.
	Masz alergię skórą, wylecz alergię przed użyciem.
Słaba moc masażu	Niski poziom naładowania baterii, naładuj masażer
	Ustawienie intensywności masażu jest za niskie, zwiększ je.

Konserwacja i utrzymanie

1. Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie przed czyszczeniem. Użyj wilgotnej chusteczki do czyszczenia podkładki kontaktowej, wcieranie alkoholu o dużej objętości jest zabronione.
2. Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników na swoim produkcie, użyj miękkiej szmatki nasączonej wodą lub łagodnym neutralnym detergentem, aby wytrzeć brud, a następnie wysusz inną szmatką.
3. Upewnij się, że do sterownika nie dostała się woda ani inna ciecz, aby uniknąć awarii.

Nazwa	Smart Neck Massager
Model	SX336
Pojemność baterii	700mAh
Rated voltage	3.7V \equiv
Input voltage	5V \equiv
Input Current	1A
Kraj pochodzenia	Shenzhen, China
Standardy	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008