




## 1 Opis produktu

Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Urządzenie służy do usuwania kamienia nazębnego i jest wyposażone w kamerę do wizualizacji. Dzięki aplikacji mobilnej można monitorować stan higieny jamy ustnej. Zastosowana technologia ultradźwiękowych wibracji o wysokiej częstotliwości umożliwia usuwanie przebarwień z powierzchni zębów. Produkt stanowi doskonałe uzupełnienie codziennej pielęgnacji zębów.

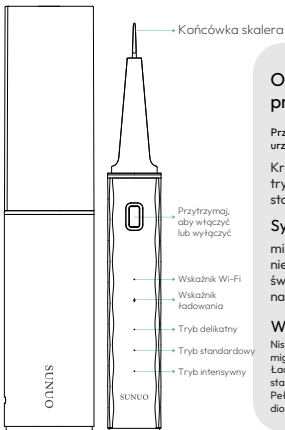

### Opis funkcji przycisku

Przytrzymanie – włączenie/wyłączenie urządzenia:

Krótkie naciśnięcie – zmiana trybu pracy (delikatny / standardowy / intensywny)

### Sygnał Wi-Fi:

migająca zielona dioda – Wi-Fi nie jest połączony; stałe zielone światło – połączenie Wi-Fi nawiązane pomyślnie

### Wskaźnik poziomu baterii:

Niski poziom baterii: migające czerwone światło  
Ładowanie: stałe czerwone światło  
Pełne naładowanie: dioda zgaszona

## 2 Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru lub uszkodzenia sprzętu bądź mienia, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

1. Urządzenie zawiera akumulator — nie należy wrzucać go do ognia ani wystawiać na działanie wysokiej temperatury, ponieważ może to spowodować eksplozję baterii.
2. Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli port ładowania nie jest dobrze zabezpieczony. Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw urządzenia.
3. Nie umieszczaj kabla ładującego w wilgotnym środowisku ani w wodzie. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.
4. Nie upuszczaj ani nie narażaj urządzenia na wstrząsy.
5. Nie używaj urządzenia podczas kąpieli ani w gorących źródłach.
6. W przypadku ciężkiego zapalenia przyzębia, leczenia zębów lub dyskomfortu w jamie ustnej – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
7. Nie używaj rozpuszczalników, benzenu ani innych substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.
8. Niewielkie krwawienie dziąseł przy pierwszym użyciu jest normalne. Jeśli jednak krwawienie jest intensywne, przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.

### 3 Instrukcja obsługi

Krok 1: Pobierz aplikację „SUNUO”

Dla iOS: Pobierz i zainstaluj aplikację „SUNUO” z App Store.

Dla Android: Pobierz i zainstaluj aplikację „SUNUO” ze sklepu Google Play.

Opcjonalnie: Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.




Urządzenia kompatybilne:  
Android 4.4, iOS 9.0 lub nowsze.

Telefony z systemem Android, takie jak: Samsung S7, Galaxy S6 Edge, Note8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel/XL/Pixel3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate10, Mate 20Pro, OnePlus itd.

Telefony z systemem iOS, takie jak: iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR itd.


## Krok 2:

Otwórz aplikację SUNUO. Najpierw kliknij „CONNECT SMART DEVICES” („Połącz inteligentne urządzenia”), następnie przejdź do kolejnego ekranu, aby rozpocząć proces łączenia, a na końcu otwórz w telefonie stronę ustawień sieci WLAN (Wi-Fi), aby połączyć się z urządzeniem.

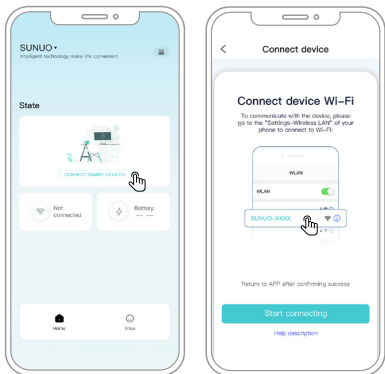

### Krok 3:

W ustawieniach sieci WLAN (Wi-Fi) znajdź urządzenie o identyfikatorze „SUNUO-XXXX” i połącz się z nim. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wróć do aplikacji SUNUO, aby uzyskać dostęp do podglądu obrazu z kamery.

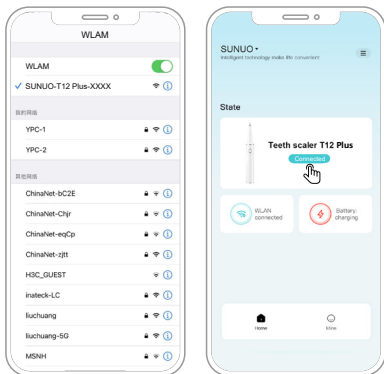

# Zalecenia

## Ostrzeżenie:


Urządzenie wykorzystuje technologię ultradźwiękową — zaczyna wibrować, gdy końcówka skalera dotyka zęba lub twardej powierzchni. W przeciwnym wypadku nie reaguje.

Zgodnie z potrzebami higieny jamy ustnej możesz wybrać odpowiedni tryb pracy:


Tryb delikatny (Gentle mode): odpowiedni dla początkujących, delikatnie usuwa osad i kamień nazębny.

Tryb standardowy (Standard mode): usuwa trudniejsze osady, takie jak przebarwienia od dymu, kawy czy herbaty.


Tryb intensywny (Strong mode): usuwa twarde kamień nazębny i dokładnie czyści zęby z większą mocą.

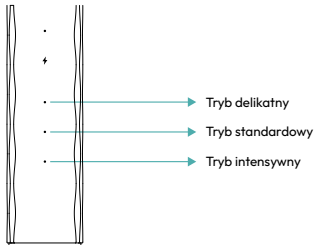

## 5 Akcesoria

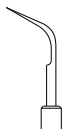

Ostry skalier  
(szczeliny między zębami)

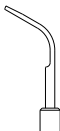

Płaski skalier  
(powierzchnia zębów)




Klucz  
(do wymiany końcówki skalera)




Osłona ochronna  
(zdejmowana)

## 6 Wymiana osłony ochronnej

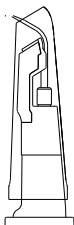


Zdejmij osłonę ochronną, unosząc ją ku górze.

## 7 Wymiana końcówki skalera

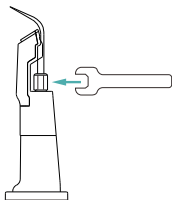


1

Odkręć nakrętkę za pomocą klucza.

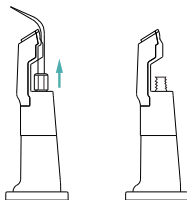


2

Wyciągnij końcówkę skalera.

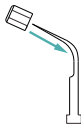


3

Nałóż nakrętkę na nową końcówkę

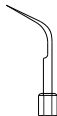

4

Sprawdź, czy nakrętka jest prawidłowo osadzona.

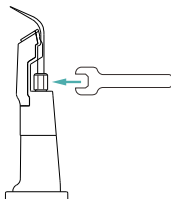

5

Użyj klucza, aby mocno dokręcić końcówkę.

## **8** Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

### **1. Czy to normalne, że dzięśła krwawią przy pierwszym użyciu urządzenia?**

Odpowiedź: Jeśli osoba cierpi na zapalenie przyzębia lub dziąseł, lub ma skłonność do krwawienia dziąseł (np. podczas szczotkowania zębów czy gryzienia twardego jedzenia), może wystąpić lekkie krwawienie. Jeśli dzięśła krwawią podczas używania urządzenia, należy natychmiast przerwać korzystanie i przepłukać jamę ustną zimną wodą.

### **2. Czy to normalne, że końcówka urządzenia nagrzewa się podczas pracy?**

Odpowiedź: Tak. Energia elektryczna przekształcana jest w energię kinetyczną podczas pracy urządzenia, co powoduje naturalne nagrzewanie się końcówki skalera.

### **3. Dlaczego urządzenie wydaje dźwięk podczas używania?**

Odpowiedź: Dźwięk powstaje w wyniku kontaktu urządzenia z powierzchnią zębów, co jest całkowicie normalne.

### **4. Dlaczego urządzenie nagle przestaje działać?**

Odpowiedź: Urządzenie posiada funkcję automatycznej ochrony. Po około 10 minutach ciągłej pracy automatycznie się wyłącza. Aby kontynuować użytkowanie, należy je ponownie włączyć.

## **9 Rozwiązywanie problemów**

### **1. Urządzenie nie reaguje po włączeniu, a kamera się nie zapala**

Naładuj baterię do pełna, a następnie włącz urządzenie ponownie.

### **2. Aplikacja się zawiesza lub zamyka**

Sprawdź, czy na telefonie nie działa zbyt wiele aplikacji w tle. Zamknij je, a następnie uruchom ponownie aplikację urządzenia.

### **3. Wskaźnik baterii miga na czerwono**

Bateria jest rozładowana – naładuj urządzenie.

### **4. Połączenie Wi-Fi jest udane, ale nie można robić zdjęć ani nagrywać wideo w aplikacji**

Wyłącz połączenie Wi-Fi, uruchom ponownie urządzenie lub wyczyść działające w tle aplikacje w telefonie. Następnie ponownie połącz się z Wi-Fi w aplikacji.

### **5. Nieudane połączenie Wi-Fi**

Wyłącz urządzenie, włącz je ponownie i postępuj zgodnie z instrukcją, aby połączyć aplikację.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po wykonaniu powyższych kroków, skontaktuj się z działem obsługi klienta – udzielimy dalszej pomocy i praktycznych wskazówek.

## 10 Parametry

### Nazwa

Inteligentny wizualny  
ultradźwiękowy skaler do zębów

T12 Plus

### Standard sieci:

IEEE 802.11b/g/n

### Częstotliwość pracy:

2.4GHz

### Prędkość przesyłu obrazu:

30fps

### Sensor obrazu:

CMOS

### Zakres temperatury pracy:

-10~50°C

### Pojemność baterii:

1200mAh

### zas pracy baterii:

About 90 minutes

### Czas ładowania:

About 1.5h -2h

### Parametry wejściowe:

5V  $\mp$  0.5A

### Napięcie robocze:

5V

### Moc robocza:

1.8W

### Rozdzielczość

5PM

### Optymalna odległość ogniskowania:

0-2CM